

Actim[®] Fecal Blood

Hygieeninen ja
yksinkertainen tapa
havaita ulosteen
piilevä veri



Actim Fecal Blood on korkealaatuinen ja käyttäjäystävällinen pikatesti, joka havaitsee piilevän veren potilaan ulosteessa. Testin edistyksellinen ja ainutlaatuinen muotoilu tarjoaa todella käytännöllisen ja hygieenisen ratkaisun, joka ei vaadi ruokavaliorajoitteita.

Testimme avulla tunnistat 10 minuutissa potilaat, joilla saattaa olla vakava ruoansulatuskanavan häiriö sekä heidät, jotka tarvitsevat pikaista sairaanhoitoa. Koska näytteenotto on niin helppoa, potilaiden ei tarvitse pelätä epämiellyttäviä tutkimuksia ja kynnys testaukseen pysyy matalana.

Miljoonat suoritettut Actim Fecal Blood -testit ovat osoitus siitä, että pikatestin laatua ja helppokäyttöisyyttä arvostetaan laajalti.

Verinen uloste – aikainen diagnosointi on elintärkeää

Uloste ei normaalisti sisällä mitattavia määriä verta ja piilevä ulosteen veri onkin merkki vuodosta ruoansulatuskanavassa. Tämä voi johtua esimerkiksi peräpukamista, mutta voi olla pahimmillaan merkki myös paksusuolen syövästä. Nopea piilevän veren havaitseminen on välttämätöntä ja voi pelastaa henkiä.

Actim Fecal Blood - helppo ratkaisu sekä potilaalle että ammattilaiselle

Testimme on ihanteellinen kaikin tavoin: se on yksinkertainen, nopea, tarkka ja turvallinen käyttää. Näytteenotto on erittäin vaivatonta ja näytteen voi kerätä milloin vain, missä vain, jopa kotona. Näytteenottoputki on niin pieni, että sen voi lähettää vaikka postitse takaisin laboratorioon. Näyte säilyy huoneenlämmössä jopa kokonaisen viikon ennen testausta. Yksivaiheinen testi on todella nopea, vieden vain 15 sekuntia aktiivista aikaa laboratoriossa. Se on aina käyttövalmis eikä siis vaadi minkäänlaisia laitteita. Testi säilyy huoneenlämmössä, ja testipakkaus sisältää kaiken testaukseen tarvittavan. Lisäksi testi on hyvin käytännöllinen, kun tehdään useampia testejä yhtäaikaaisesti.


UUROAMATON NÄYTTEENOTTOSYSTEMI

Innovatiivinen ratkaisumme mahdollistaa poikkeuksellisen hygieenisen testauksen ja näytteenkäsittelyn. Näytteenottosysteemi on suljettu eikä putkea tarvitse

avata testausta varten. Tämä tekee siitä turvallisen ja huolettoman. Testi tarvitsee hyvin pienen näytemäärän, jonka näytteenottosysteemi säätää juuri optimaaliseksi – näin taataan, että tulokset ovat aina tarkkoja.

MITEN TESTI TOIMII

Actim Fecal Blood -testi havaitsee ruoansulatuskanavan verenvuodon jo ennen kuin se on silminnähtävää. Testi on korkealaatuinen, 94 prosenttisen spesifinen ja optimaalisen herkkä. Sen avulla voidaan välttää tarpeettomat, epämukavat ja kalliit tutkimukset. Testi on immunologinen ja perustuu vain ihmisen hemoglobiinia tunnistaviin monoklonaalisiin vasta-aineisiin; se ei aiheuta ristireaktioita muiden hemoglobiinien kanssa. Toisin sanoen, testi ei vaadi ruokarajoituksia: punaista lihaa sekä peroksidaasiaktiivisia kasviksia ja hedelmiä voidaan huoletta syödä juuri ennen testausta.

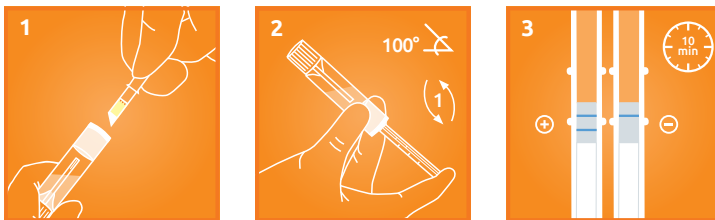

1. Puhkaise korkki
2. Aktivoi testi
3. Lue tulos



Ota yhteyttä

Actim Oy – Medix Biochemican tytäryhtiö
Klovinpellontie 3, FI-02180 Espoo
(09) 547 68 200
tilaukset@actimtest.com

www.actimtest.com



Tilaustiedot

Actim Fecal Blood, 20 testiä	30331ETAC
Actim Fecal Blood, 10 testitikkua	30361ETAC
Actim Fecal Blood, 20 puskuriputkea	30372ETAC
Actim Fecal Blood Controls	30300ETAC